


EVOCS®

Snel, veilig en eenvoudig
medische beelden
digitaal uitwisselen.

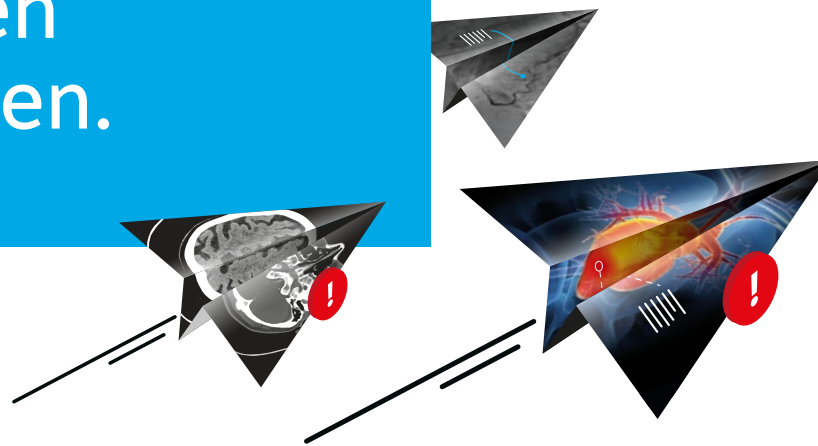

Beoordelen, rapporteren, opslaan en delen.

EVOCS is onder zorginstellingen de meest geaccepteerde manier om medische beelden en rapporten uit te wisselen. Via de EVOCS webapplicatie kunnen medische professionals, ziekenhuisbreed, sneller en efficiënter uiteenlopende soorten diagnostische beelden beoordelen, rapporteren en opslaan. Een patiënt wordt sneller geholpen of doorverwezen, een nieuwe specialist krijgt direct beelden toegestuurd, hetgeen een diagnose versnelt.

Overal en op elk gewenst moment.

Fysicon
creating medical solutions

A CANON GROUP COMPANY

EVOCS[®]

Werk efficiënter: bespaar tijd en middelen.



Hoe werkt het?

De EVOCS webapplicatie ontsluit patiëntdata vanuit verschillende informatiebronnen, zoals PACS en ZIS en integreert ze met (DICOM-)modaliteiten zoals MRI, CT, XA, US en ECG. Op deze manier kunnen zorginstellingen beelden en rapporten in diagnostische kwaliteit met elkaar delen. Gebruiksvriendelijk, snel en veilig.

Gemakkelijk, bespaar tijd


De EVOCS webapplicatie is gebruiksvriendelijk, veilig en stabiel. Geavanceerde techniek is eenvoudig in gebruik gemaakt. En daardoor: tijdbesparend.

Houd altijd overzicht

In één oogopslag een duidelijk overzicht van gestuurde en ontvangen scans / studies en documenten, of bijvoorbeeld de status van een verzonden bericht.



Voeg metingen + notities toe

EVOCS heeft een eigen online viewer waarin metingen en annotaties mogelijk zijn. Uiteraard is het ook mogelijk om beelden in een eigen (PACS) viewer te bekijken.

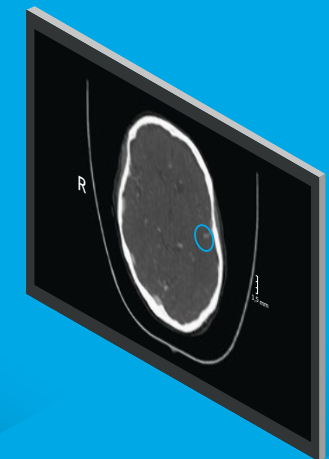

Overleg in real-time

Handige communicatie- en beoordelingsmogelijkheden. Via de live-chat functionaliteit kunt u realtime berichten uitwisselen met specialisten, en dus snel overleggen.

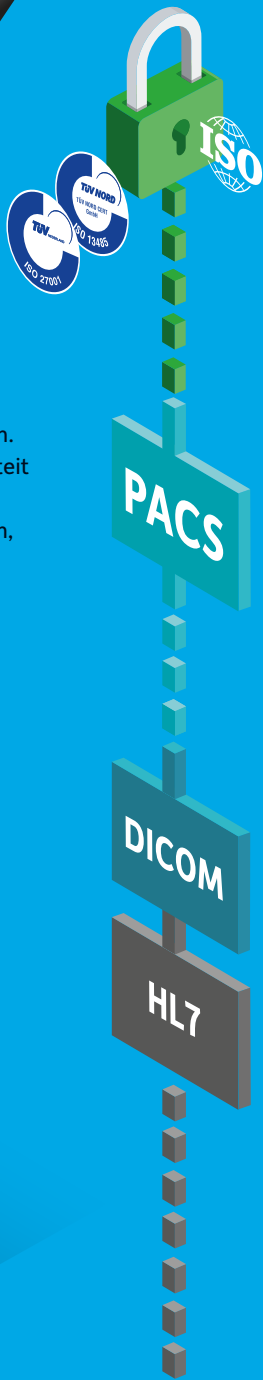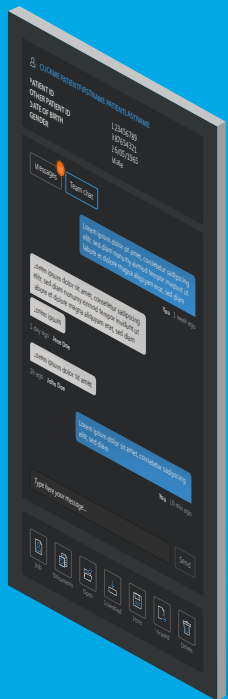

Gegarandeerd veilig versturen

Fysicon is ISO 27001 en ISO 13485 gecertificeerd. EVOCS (en al onze andere producten) voldoet daardoor aan de strengste internationale veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen, waaronder GDPR.

Koppelingen

Indien gewenst kan EVOCS met uw bestaande PACS en ZIS koppelen, het is zelfs mogelijk om een studie direct van een modaliteit of statief te delen.

Volgens internationale standaarden DICOM, HL7

EVOCS maakt gebruik van DICOM en HL7 standaarden.

Start vandaag nog

U kunt vandaag al starten met EVOCS. Kijk op www.fysicon.com/EVOCS

Zo werkt EVOCS

EVOCS is een webapplicatie waarmee snel en veilig medische beelden en rapporten uitgewisseld kunnen worden. Het enige dat u nodig heeft is een PC met internetverbinding.

Veel aangesloten instellingen koppelen de EVOCS-applicatie met een PACS, VNA of EPD met behulp van de EVOCS Engine. Zo is het mogelijk om beelden en rapporten vanuit een PACS of VNA te verzenden, en om ontvangen studies met de juiste patiëntgegevens op te slaan.

Naast de basisfunctionaliteit van het delen en ontvangen van bestanden, kan EVOCS uitgebreid worden met een aantal optionele modules:


- **EVOCS Transfer:** Beelden en rapporten delen zonder account
- **HL7-koppeling:** Slimme patiënt ID-verificatie
- **Autostore:** Bespaar tijd door het automatiseren van processen.



Via het EVOCS platform kunt u inloggen en beelden en rapporten ophalen vanaf het met EVOCS gekoppelde beeldarchief (PACS, VNA, etc.) of vanaf een lokale opslaglocatie, en deze delen met een andere zorginstelling.



Een ontvangende zorginstelling kan deze ontvangen beelden en rapporten zowel bekijken in de online EVOCS-viewer, als deze opslaan naar het gekoppelde beeldarchief en van hieruit bekijken in een viewer naar keuze.

Gebruiker A

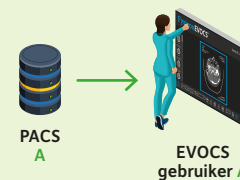


EVOCS Transfer

Gebruiker zonder EVOCS account via transfer.evocs.com

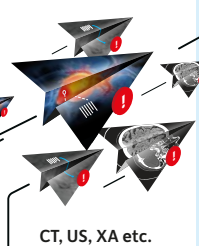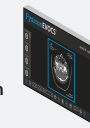

Gebruiker B

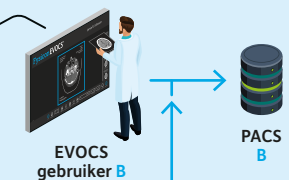


Patiënt informatie



Het EVOCS® netwerk in Nederland



Start vandaag nog.

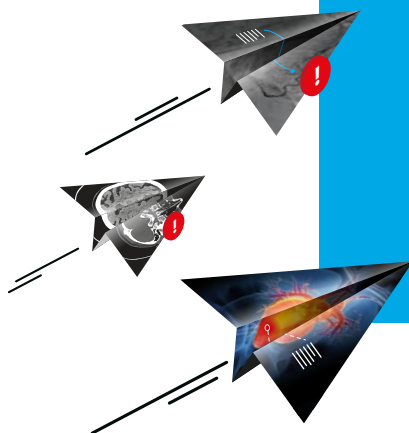

EVOCS® ook op uw afdeling?

Vraag een demo op locatie
aan via www.fysicon.com/EVOCS

EVOCS is gebaseerd op webtechnologie en kan daardoor altijd en overal worden ingezet. Er zijn geen kostbare investeringen nodig in de infrastructuur, en langdurige implementatietrajecten zijn er ook niet. Op onze website kunt u alles nog eens rustig bekijken. En via het contactformulier kunt u direct een demo op locatie aanvragen. Een EVOCS account is binnen een dag geregeld. Dus u kunt zelfs vandaag al starten met EVOCS!

Overal en op elk gewenst moment.

**85% van de
ziekenhuizen
in Nederland
gebruikt
EVOCS**

Fysicon is marktleider
op het gebied van
digitale medische
beelduitwisseling in
Nederland.



ETO-193-BA.03



Hooghevelstraat 114
5349 BA Oss



fysicon.com



info@fysicon.com



0412 65 33 33

Fysicon

creating medical solutions

A CANON GROUP COMPANY